



Foutherkenning Frankfurter Vlak

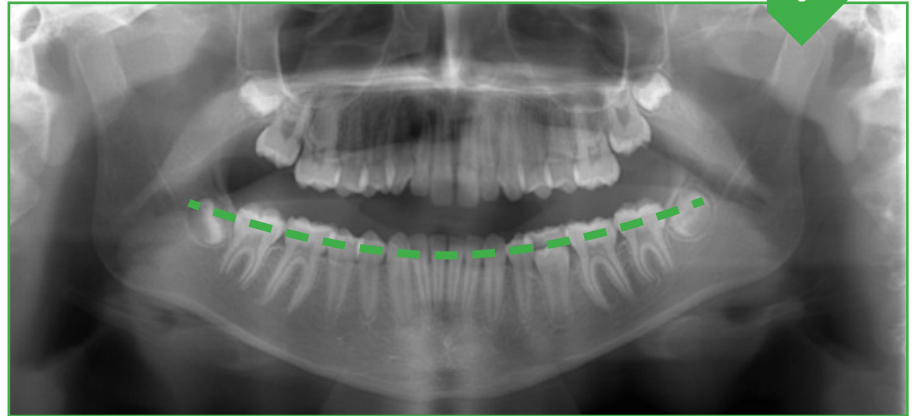



De volgende voorbeelden gaan er vanuit dat de frankfurter lijn goed door de orbita (diepste gedeelte oogkas) loopt.

Correcte instelling

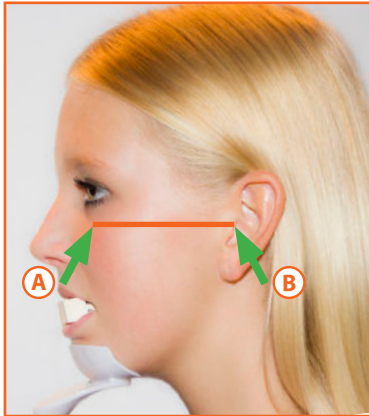



Positie B staat **correct op de gehooringang** ingesteld.

Foutieve instelling

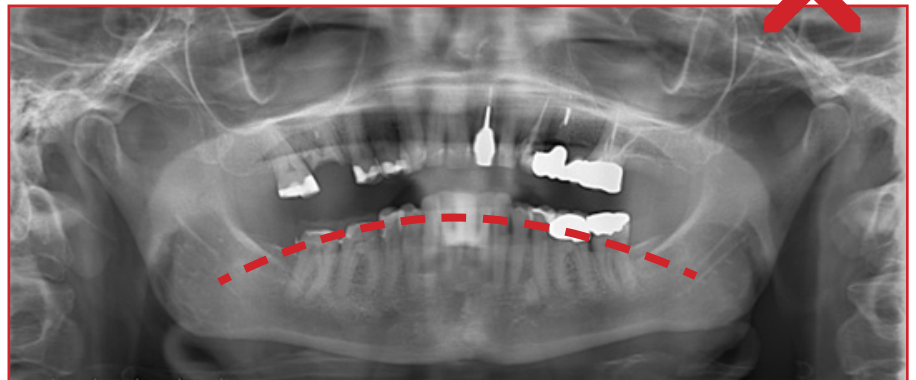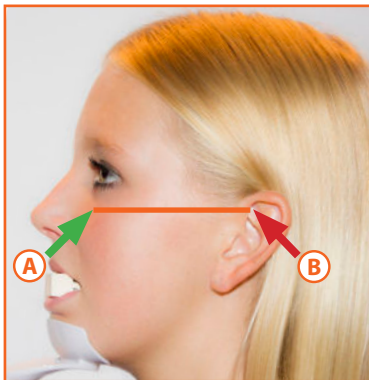

Positie B staat **te hoog** ingesteld.

Foutieve instelling

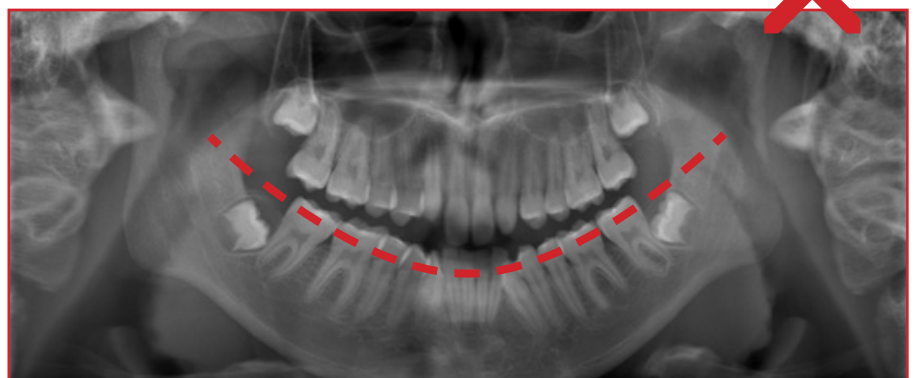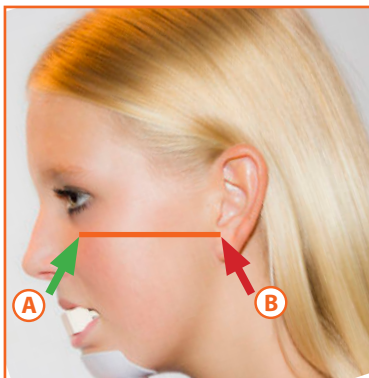


Positie B staat **te laag** ingesteld.

Foutherkenning Image Layer




Correcte instelling

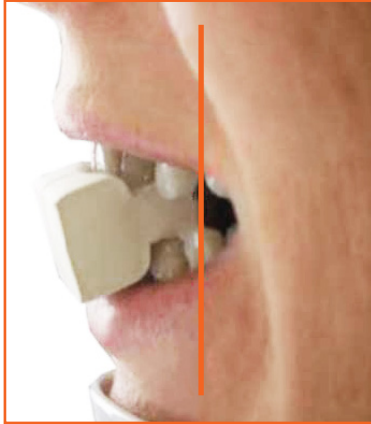

Positionering van de laser / lichtbundel distaal van de **23** zorgt voor een correct ingestelde laag.

Foutieve instelling

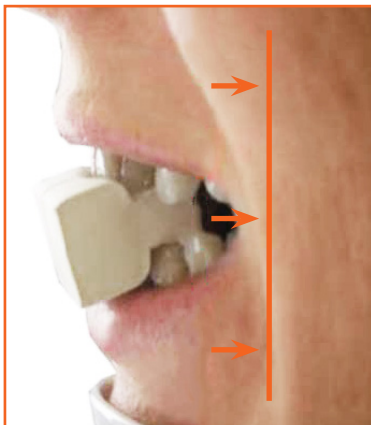


Positioneringsbundel staat **te veel distaal** van de hoektand.

Gevolgen:

- Verkleinde weergave van het front.
- Kaak wordt verkleind weergegeven waardoor pre-molaren en molaren dicht op elkaar geplaatst worden (overlap).

Foutieve instelling

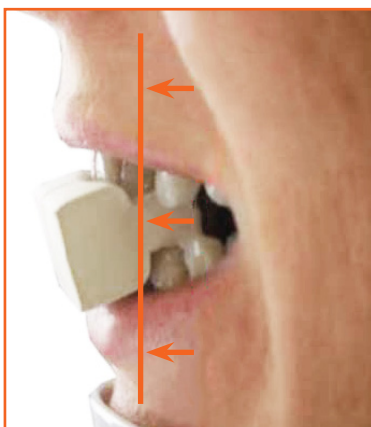

Positioneringsbundel staat **te veel mesiaal** van de hoektand.

Gevolgen:

- Vergrootte en minder scherpe weergave van het front .