



Ontdek ons brede assortiment aan behandelunits

www.e-dental.nl

 **e-dental**

Ergonomie en vorm perfect gecombineerd

Vol trots presenteren wij u in deze brochure alle behandelconcepten die wij u kunnen aanbieden. Wij geven u een compleet overzicht van opties en mogelijkheden.

J. Morita

De behandelunits van J. Morita staan wereldwijd bekend om hun Japanse precisie, hoogwaardige afwerking en vooruitstrevende techniek. Morita produceert al zijn apparatuur volledig in eigen huis in Japan, wat zorgt voor uitzonderlijke betrouwbaarheid en duurzaamheid. Met ruim 110 jaar ervaring (opgericht in 1916) en een wereldwijd team van ongeveer 2.400 medewerkers behoort Morita tot de meest innovatieve fabrikanten in de branche. De Signoseries combineren stille werking met geavanceerde technologie en optimaal werkcomfort.

Chirana

Chirana units danken hun populariteit niet alleen aan de hoge kwaliteit, fraaie vormgeving en perfecte ergonomie maar ook aan hun standaard al bijzonder complete uitvoeringen. De fabrikant heeft een rijke geschiedenis van ruim 90 jaar, met wortels in precisieengineering sinds 1935 en fabriceert tevens voor andere gerenommeerde merken. Het bedrijf beschikt over een stabiel team van bijna 300 gekwalificeerde medewerkers.

Qdent

De Focusseries komt van oorsprong uit Scandinavië en werd zo'n twintig jaar geleden onder de naam Qdent naar Nederland gebracht. Hier werden de units verder doorontwikkeld en geproduceerd, met nadruk op robuustheid, degelijkheid en ergonomie. Inmiddels wordt het grootste deel van de productie verzorgd door Galit, waarbij de nieuwste ontwerpen gezamenlijk worden ontwikkeld. Het resultaat: moderne, doordachte behandelunits die technisch sterk zijn en perfect aansluiten bij de wensen van de hedendaagse tandarts.

Galit

Galit is een middelgrote fabrikant met meer dan 150 medewerkers en 25 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige tandheelkundige apparatuur. Het bedrijf is pionier op het gebied van standalone behandelunits, met autonome oplossingen die maximale flexibiliteit bieden. Alle units hebben een vriendelijke uitstraling en worden voorzien van behandelstoelen, van het Italiaanse Tecnodent. Er worden dus geen concessies worden gedaan aan het comfort van behandelaar en patiënt.

Tecnodent

Het Italiaanse Tecnodent is producent en marktleider van behandelstoelen van de allerhoogste kwaliteit. Vele fabrikanten, zoals XO Care en Ultradent, maken ook gebruik van deze stoelen. Tecnodent heeft zich ruimschoots bewezen op het gebied van degelijkheid, duurzaamheid, ergonomie en hygiëne.



Inhoudsopgave

Morita Signo T100	04
Chirana Connect	06
Chirana EASY	10
Chirana EASY Expose	12
Chirana EASY Switch	13
Chirana EASY Impose	14
Chirana EASY Uni	14
Chirana EASY Cart	15
Stand-Alone	16
Qdent S-series	18
Qdent Focus S-50 A	22
Qdent Focus S-50 P	24
Qdent Focus S-50 L	26
Qdent Focus S-50 C	28
Qdent S-40 Ortho	30
	32



Morita

Signo T100

Tijdloos design. Doordachte techniek. Dagelijks comfort.

De Morita Signo T100 is een behandelunit waarin Japans vakmanschap en Europees design samenkomen. Het ontwerp is gebaseerd op dezelfde designfilosofie als de premium Signo T500 en ontwikkeld in samenwerking met Studio F. A. Porsche. Het resultaat is een toegankelijke unit, zonder concessies te doen aan kwaliteit, ergonomie en betrouwbaarheid.

- 1 uitgerust met gebalanceerde zweeparmen met balansveren, ontworpen om nagenoeg geen kracht uit te oefenen op pols, arm en schouder.
- 2 Dankzij het pantograaf-hefsysteem beweegt de stoel uiterst stabiel en soepel. Patiënten kunnen tijdens de behandeling comfortabel hun benen strekken.
- 3 De hoofdsteun is ontworpen voor snelle en eenvoudige positionering en voorkomt ongewenste bewegingen van het hoofd tijdens de behandeling.
- 4 Optimale zichtbaarheid, maximale hygiëne
De Luna Vue TS LED-behandellamp levert tot 30.000 lux en is instelbaar in meerdere lichtniveaus.
- 5 Slimme eenvoud in dagelijks gebruik. De unit is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en onderhoud.



Eenvoudig te reinigen
Deze spoelvoorziening verwijdert effectief het restwater uit de watervoerende leidingen van de behandelingseenheid. Dankzij de speciaal ontworpen adapter kan het systeem ruimtebesparend onboard worden opgeborgen. Dit draagt bij aan optimale hygiëne en een efficiënte werkwijze.

SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart
- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Chirana Connect

De meest complete behandelunit in zijn klasse. Innovatie, comfort en design opnieuw gedefinieerd

De Chirana Connect is niet zomaar een behandelunit; het is een slimme, volledig configureerbare werkplek die zich aanpast aan jouw manier van werken.

Waar andere units in deze prijsklasse stoppen, gaat de Connect verder met functies die je workflow sneller, hygiënischer en comfortabeler maken.

- 1 De Chirana Connect is niet zomaar een behandelunit; het is een slimme, volledig configureerbare werkplek die zich aanpast aan jouw manier van werken.
- 2 Het spittoon geheel opnieuw ontwikkeld.
- 3 Ergonomische afzuigarm met hygiënisch glasbedieningspaneel.
- 4 De compacte en slanke instrumentbrug biedt ruimte aan vijf instrumenten en is leverbaar in zowel een zweepvariant als een hangslang-uitvoering.
- 5 Alle instrumenten en functies bedien je via een strak, hygiënisch glazen touchscreen.



**Innovatie, comfort en design
opnieuw gedefinieerd**



SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart

- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Productdetails **Chirana EASY**

De EASY line van Chirana biedt u een ruime keuze aan behandelunits welke allemaal veel vrijheid bieden in onder andere instrumentkeuze en behandeltype. De prijs- kwaliteit-verhouding is onovertroffen zonder welke concessie dan ook.



Ergonomisch en **Hygiënisch**



- ① De slanke zweepen zijn eenvoudig te reinigen en te desinfecteren.
- ② De zweeprubbers geven naast ultieme bewegingsvrijheid een superieure balans.
- ③ Uw instrumenten hangen onder een ideale hoek en vrij voor snel en ergonomisch werken.



Overzichtelijk en intelligent

De EASY line biedt voor zowel de zweep, hangslang als cart variant een overzichtelijk instrumentplateau dat bovendien glad is afgewerkt en daardoor makkelijk is te reinigen.

Het bedieningselement biedt onder andere directe toegang tot functies als toerental instelling, spray instelling en rotatie richting. De EASY line biedt precies de instelmogelijkheden die u mag verwachten van een behandelunit. Liever instellen met een hygiënisch touch screen? Geen probleem ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Standaard is de EASY
al heel compleet uitgerust

De Chirana EASY line uit te rusten met de volgende kenmerken:

- Lage snelheid regeling micromotoren
- WIP spoelsysteem
- Programmeerbare snelheden micromotoren
- Links- en rechtsdraaiende micromotoren
- Programmeerbare intensiteit scaler
- Elektronische sprayregeling
- Twee jaar fabrieksgarantie
- Intuïtief bedieningspaneel
- Multifunctionele voetschakelaar
- Spraywater desinfectie en demineralisatie
- LED operatielamp

Optioneel is een heldere hygiënische touch screen bediening mogelijk.



De multifunctionele voetbediening is ook draadloos leverbaar.



Chirana

EASY Expose

De Expose geeft behandelaar en assistent een ruime plek met voldoende beenruimte. De 'zwevende' stoel geeft de unit een luchtig karakter, de ovale vorm van de unitzuil komt terug in het armsysteem en de kappen.

Een evenwichtig en degelijk design karakteriseren de Expose. De unit kan op de traditionele wijze worden gebruikt, instrumenten na afloop naar het voeteneinde maar ook op de Scandinavische wijze, instrumenten naar de assistent na afloop van de behandeling. Die flexibiliteit maakt de Expose een allemans vriend.

- 1 Het ergonomische armsysteem kan volledig over de unitzuil naar de assistent zijde verplaatst worden waardoor reiniging van de instrumentbrug efficiënt kan worden uitgevoerd en het in / uitstappen van de patiënt zeer gemakkelijk gaat.
- 2 De zwevende behandelstoel zorgt voor een ruimtelijk effect en maximale bewegingsvrijheid voor de behandelaar.
- 3 Het in hoogte verstelbare afzuigconsole is gemakkelijk in elke positie te manoeuvreren.
- 4 De unitzuil kan zowel met als zonder spittoon uitgevoerd worden.



Flexibiliteit maakt de EASY Expose een echte allemansvriend

SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart
- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Chirana

EASY Switch

Doe eens anders, kies eens niks naast de stoel. De unit is alleen op functionele wijze aanwezig. Naast de futuristische looks functioneert dit concept efficiënt.

Het instrumentplateau en de operatielamp ontspringen uit het plafond en geven een maximale vrijheid. De afzuigarm onder de stoel is eenvoudig te verplaatsen zodat de links- en de rechtshandige behandelaar zich bijzonder thuis voelt.

Bewegingen van de patiënt hebben geen invloed op instrumenten of operatielamp, die stabiliteit komt het werkplezier ten goede. De Switch is compact, bijzonder handig in kleinere ruimtes maar ook in de grotere behandelkamer komt het minimalistische design goed uit de verf.

- ① De gebogen arm is uniek in de markt en zorgt ervoor dat dit de enige plafond unit is die 100% instapvrijheid biedt
- ② De opstelling van de EASY Switch geeft de behandelaar, assistent en de patiënt vrijheid
- ③ De afzuigarm is net als de gehele unit eenvoudig van links naar rechts te verplaatsen
- ④ De communicatie tussen de plafondunit en de stoel komt samen in de stoelvoet.

Uitgevoerd met Chirana Sk101



SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart
- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Chirana

EASY Impose

De unit voor iedereen die van minimalisme en functionaliteit houdt. Naast een lust voor het oog, is het ook een lust voor efficiënt en hygiënisch werken.

Het instrumentplateau en de operatielamp ontspringen van een slanke kolom die naast de stoel staat, de afzuigarm onder de stoel is eenvoudig te verplaatsen zodat de links- en de rechtshandige behandelaar zich bijzonder thuis voelt.

Bewegingen van de patiënt hebben geen invloed op instrumenten of operatielamp, die stabiliteit komt het werkplezier ten goede. De Impose is compact, bijzonder handig in kleinere ruimtes maar ook in de grotere behandelkamer komt het minimalistische design goed uit de verf.

- ① De elegante arm geeft veel bewegingsvrijheid waardoor deze unit ideaal is voor links- en rechtshandig gebruik.
- ② Het slanke statief staat richting de stoelvoet geplaatst waardoor een maximaal behandelgebied overblijft voor de behandelaars en assistent.
- ③ De in hoogte verstelbare afzuigconsole is gemakkelijk aan de rechter en linkerkant van de rugleuning te plaatsen.

Uitgevoerd met Chirana Sk101



SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart
- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Chirana

EASY Uni

De EASY uni een veelzijdige unit speciaal voor profylaxe of orthodontie.

De EASY uni staat voor universeel, en dat is deze unit. Het gecombineerde afzuig/instrument paneel zwenkt gemakkelijk en snel van rechts naar links en is volledig naar wens in te delen. De instrumenten worden ingesteld op het geïntegreerde bedieningspaneel.



- ① Het instrumentplateau biedt naast een kleine en grote afzuiging ruimte aan 3 instrumenten en is links en rechts te plaatsen.
- ② Optioneel is een tweede links-rechts arm te plaatsen in combinatie met een tray.

SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart
- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Chirana

EASY Cart

De Easy cart is als een van de weinige carts in hoogte verstelbaar. Dit is bijzonder handig, aangezien niet iedere behandelaar dezelfde lichaamslengte heeft een praktische en in hoogte verstelbare cart.

De unit heeft voldoende slanglengte om het instrumenten-plateau daar te plaatsen waar het, vanuit ergonomisch oogpunt gezien, ideaal is. Daarnaast zijn de houders zo vormgegeven dat de instrumenten gemakkelijk terugvallen en stabiel geplaatst zijn.

De bijgeleverde junction box zorgt ervoor dat bestaande leidingen gemakkelijk worden bedekt.

- ① Middels een druk op de knop is de cart traploos in hoogte te verstellen.



SHORTLIST:

- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Ontdek maximale vrijheid met Stand-Alone werken

U wilt wel een geheel compleet behandelstelsel in uw behandelkamer maar u ziet op tegen een grote verbouwing? U kunt of mag in uw praktijk geen duur leidingwerk in laten frezen of u bent op zoek naar een flexibele behandeloplossing? E Dental heeft meerdere oplossingen in het assortiment wanneer het gaat om Stand-Alone werken.

Neem bijvoorbeeld de complete all-in-one behandelunit van Qdent: de S-60. Een alleskunner die er ook nog eens stijlvol uit ziet en geluidsarm werkt. Of wat dacht u van het kleine zusje van de S-60:

de S-60 Mini. De strakke kolom is de behuizing van een krachtige compressor met luchttank. Wanneer deze gecombineerd wordt met een mobiel afzuigapparaat is in no-time een complete four handed opstelling geïnstalleerd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere oplossingen, ze staan allemaal demonstratieklaar in onze ruime showroom opgesteld. U bent van harte uitgenodigd om onze showroom te komen bezoeken om u uitgebreid te laten informeren naar de mogelijkheden.

- **Geen** kostbaar hak- en breekwerk
- **Geen** ingewikkeld leidingwerk
- **Geen** langdurige verbouwing

Vraag onze Stand-Alone brochure aan via sales@e-dental.nl of bel: 088 6060810



Geïntegreerde afzuigmotor

Geïntegreerde amalgaamscheiding en afvalwater

Geïntegreerd schoon en afvalwater

Geïntegreerde compressor



Slechts één stopcontact is voldoende



Voorzien van Hepa® filters

Productdetails

Qdent S-series

Qdent units zijn duurzaam en bewezen betrouwbaar. De slimme constructie, het gebruik van hoogwaardige componenten en de jarenlange ervaring staan garant voor comfortabel en probleemloos werken.

Het lean & clean design van de Qdent units vergemakkelijkt en versnelt het, tussen patiënten door, reinigen en desinfecteren. Het gladde oppervlak en het hoge afwerkingsniveau van de unit zijn onontbeerlijk voor ultieme hygiëne en leveren tijdswinst op.



Oogstrelend design



1

1 De dunne zweepen zijn eenvoudig te reinigen en te desinfecteren.

2

2 De zweepveren zorgen voor superieure balans en bewegingsvrijheid en stimuleren ergonomisch werken.

3

3 Het dunne instrumentplateau geeft de patiënt extra lucht en comfort.

Vrijheid en ergonomie

Het dunne instrumentenplateau neemt weinig ruimte in en kan dicht op de patiënt worden geplaatst.

De instrumenten liggen handig in het verlengde van de mond van de patiënt en het hanteren van de instrumenten leidt dan ook niet tot schouderklachten of andere gezondheidsproblemen. De geringe afmeting maakt het mogelijk dat behandelaar en assistent dicht bij elkaar zitten, beiden een optimaal zicht hebben op de mond en beiden alle instrumenten gemakkelijk kunnen hanteren.



De Qdent S-serie uit te rusten met de volgende opties:

- Draadloos voetpedaal (Behalve de S-40 Ortho)
- WIP spoelsysteem
- Programmeerbare snelheden micromotoren
- Links- en rechtsdraaiende micromotoren
- Programmeerbare intensiteit scaler
- Programmeerbare Micromotoren
- Elektronische sprayregeling
- Hoogwaardig metalen frame
- Twee jaar fabrieksgarantie
- LED operatielamp
- Spraywater desinfectie
- CWSS (controlled water supply system)

Het optionele touch screen is multifunctioneel en zeer intuïtief in gebruik.



Een draadloos voetpedaal behoort tot de standaard uitrusting (behalve bij de S-40).



Qdent

Focus S-50 A


Ergonomisch, multifunctioneel en mooi, zo kenmerkt zich deze links- rechts handige behandelunit.

In enkele seconden is deze unit veranderd van een rechtshandige in een linkshandige opstelling, inclusief het spittoon. Deze Europese variant op het succes van dit systeem is extreem veelzijdig, betrouwbaar en duurzaam. Zonder enige concessie en direct over traditioneel aangelegde leidingen te plaatsen tovert u uw ruimte tot een voor ieder te gebruiken behandelruimte.

- 1 In enkele seconden zwenkt de metalen arm van links naar rechts en vice versa.
- 2 De links-rechts te plaatsen afzuigarm is selectief en beweegt gemakkelijk in elke gewenste positie.
- 3 Het optionele spittoon vormt een eenheid met de afzuigarm en is net als de zweepbrug in een handomdraai van links naar rechts te verplaatsen.
- 4 De operatielamp kan aan de unit of aan het plafond bevestigd worden.



Wissel eenvoudig van links- naar rechtshandig in slechts 5 seconden

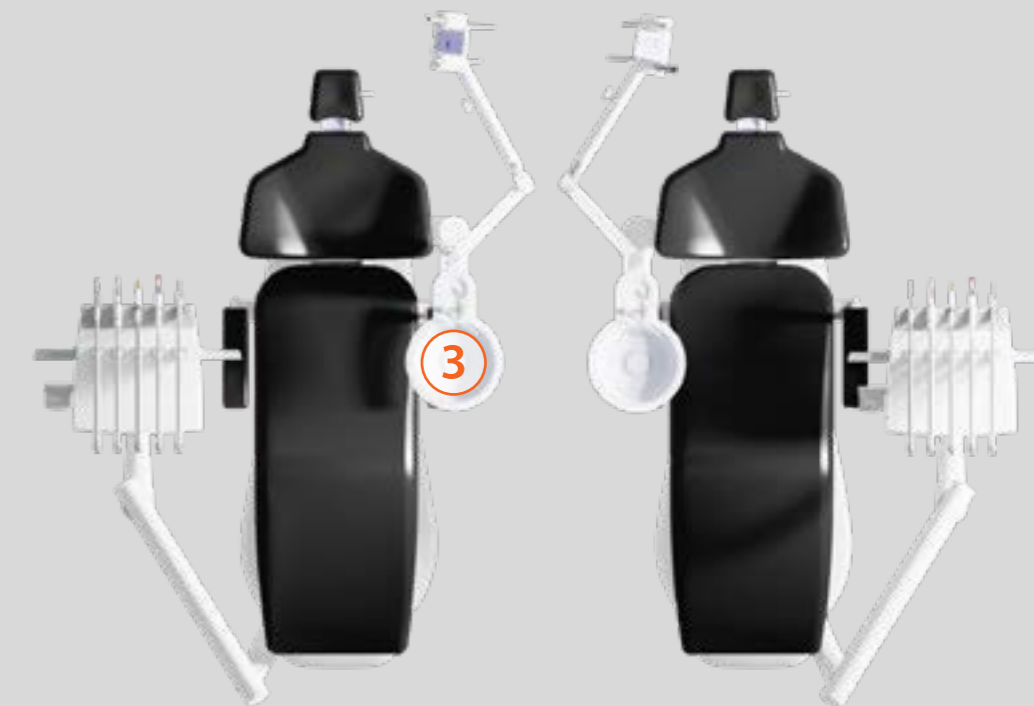

SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart

- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Qdent

Focus S-50 P

Op zoek naar een oogstrelend mooie plafondunit?

De Focus S-50P is het! Een stabiel armsysteem midden boven de stoel geeft zowel de links- als rechtshandige behandelaar alle ergonomische voordelen. De plafond unit is bijzonder compact en neemt nauwelijks meer ruimte in dan de behandelstoel. Omdat er verder niets anders op de vloer staat is de gehele behandelruimte snel en gemakkelijk gereinigd en/of gedesinfecteerd. Behandelaar en assistent ervaren een grote mate van vrijheid rondom de hoofdsteun.

- 1 De Qdent Focus arm is uniek in de markt en zorgt voor een stabiel instrumenten plateau.
- 2 De opstelling van de Focus S-50 P is ook in kleine ruimtes bijzonder comfortabel.
- 3 De afzuigarm is net als de gehele unit eenvoudig van links naar rechts te verplaatsen.
- 4 De leidingen komen uit onder de stoelvoet, er loopt slechts 1 communicatiebuis naar het plafond.



Optimale ergonomie voor links- en rechtshandigen



SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart

- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Qdent

Focus S-50 L

De Qdent Focus S-50 L is ons nieuwste behandelconcept. De compacte en slanke kolom bied ruimte aan een zeer krachtige motorlift.

Hieraan hangt de stijlvolle behandelstoel van het Italiaanse kwaliteitsmerk Tecnodent, extreem stabiel naast de kolom. Door de traploos verstelbare lift ontstaat een zeer ruimtelijk effect. De afzuigarm waarop een tweede stoelbediening is gesitueerd is goed binnen handbereik en kan indien gewenst worden voorzien van twee extra instrumenten.

- ① De Qdent Focus S-50 L is standaard uitgerust met een Faro EVA LED operatielamp.
- ② De afzuigarm is perfect in positie te brengen en bied optimale ergonomie voor uw assistente.
- ③ De stabiele Qdent Focus arm brengt u moeiteloos in de voor u perfecte positie. Dit zorgt voor een stabiel en goed bereikbaar instrumenten plateau.



Een stijlvolle zwevende stoel
aan een compacte slanke kolom



Ook de S-50 L is leverbaar
met of zonder spittoon

- ④ De slanke kolom behuist de geluidsarme stoellift en de zorgt voor een uiterst stabiele basis.
- ⑤ Standaard is de Focus S-50 L uitgerust met spittoon en Durr-Dental spittoonklep.
- ⑥ Het flessysteem is doormiddel van goed bereikbare schakeling eenvoudig te activeren.

SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart
- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Qdent

S-40 Ortho

De S-40 Ortho is bijzonder geschikt voor gebruik in de orthodontische praktijk, profylaxe en voor mondhygiëne.

Het concept is eenvoudig, van een hoge ergonomische standaard en solide kwaliteit. S-40 Ortho is geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik; een voordeel dat niet mag worden onderschat. Het gebruikte materiaal en de aantrekkelijke afwerking geven de S-40 Ortho een bijzondere degelijkheid. Het robuuste ontwerp zet dit voort en tegelijkertijd is het toch aantrekkelijk om naar te kijken; uiterlijk doet er toe.

- 1** De multifunctionele links-rechts arm is standaard voorzien van een kleine en grote afzuiger en kan worden uitgebreid met o.a. een micromotor, meerfunctiespuit en scaler.
- 2** De unit kan ook uitgebreid worden met een operatielamp en/of monitor arm.
- 3** In combinatie met de Faro Alya V-Cam wordt de unit omgetoverd tot de ideale consult op afstand unit. Hoge resolutie beelden worden direct vanuit de camera in de operatielamp beschikbaar gesteld via een live stream.



**Robuust maar toch
een stijlvol uiterlijk**

Optioneel uit te rusten met Faro Alya V-Cam en/of monitor.



De arm is uitgerust met een veiligheidssysteem om niet in conflict te raken met de rugleuning van de stoel.



SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart

- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Qdent

Focus S-50 C

Deze bijzonder slanke cart is volledig opgetrokken uit metaal en is daardoor extreem solide.

Naast solide is deze verrijdbare unit semi stand-alone door een geïntegreerde junction box en volledig glad afgewerkt, werkelijk een plaatje.

- 1 Afneembare en autoklaveerbare instrumenthouders zorgen voor hygiënisch werken.
- 2 Aan het stabiele frame kunnen op diverse manieren tray opties gemonteerd worden en kan optioneel worden uitgerust met de Easy-Tray-Clip.
- 3 Door de geïntegreerde junctionbox heeft de cart enkel een stroomaansluiting en een luchtaansluiting nodig. Semi Stand-Alone dus!



SHORTLIST:

- Hangslang
- Zweep
- Cart

- Stand-Alone
- Links- / Rechtshandig

Ook wanneer u écht specifieke wensen hebt kunt u bij ons terecht

Hoewel ons standaard assortiment bestaat uit een ruime keus van optimaal samengestelde behandelconcepten kan het natuurlijk zijn dat u toch nét een andere specifieke configuratie wenst.

Zoveel mensen zoveel wensen. Of u nu een compleet zwart behandelconcept wilt, een éxtra monitor en een éxtra groot tablet op een pantograafarm. We denken graag met u mee om uw optimale behandelconcept te creëren. Een spittoon of éxtra instrument op de afzuigarm, onze technische dienst heeft de kennis en passie in huis om uw wensen perfect te assembleren.

Daag ons uit en samen vertalen we uw wens in een optimaal werkend en ergonomisch behandelconcept.

Neem contact op met onze productspecialisten via sales@e-dental.nl of bel: 088 6060810



Onze ergonomische behandelstoelen



Tecnodent
2009 Next



Tecnodent
Linda NEXT



Tecnodent
Linda EVO



Chirana
SK1.01

**Gecombineerd met bijpassende
ergonomische werkstoeltjes**



Ontdek ons complete assortiment



Vraag onze brochures aan via sales@e-dental.nl

